

SL写真撮影装置MPS-6専用

ホルムアルデヒド換気装置PPF-6


コードNo.6-771

エアーカーテン方式の換気装置が作業環境を変えます！

カメラのファインダーを覗きながら至近距離の撮影が安全に行えます


作業者の口元から標本までの距離が130ミリの位置でホルムアルデヒド濃度を0.1ppm以下に抑えました。

* 濃度測定 : 厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号 1501)を使用。

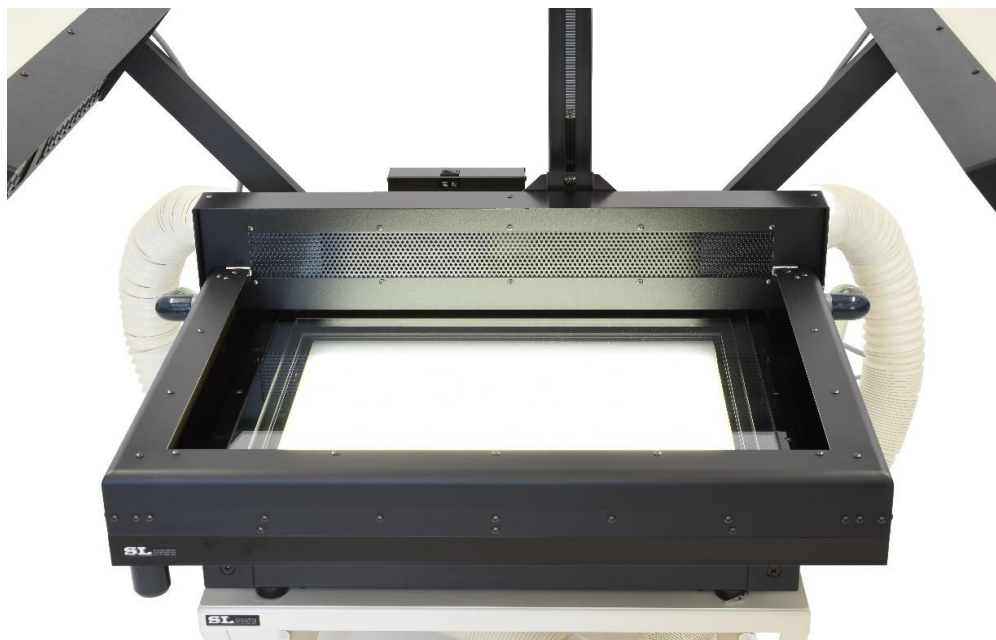

※ 写真撮影装置MPS-6は別売品です。詳細は専用カタログをご覧ください。

★気流の動きに注目してください。換気装置を運転すると、すぐに効果が現れます！

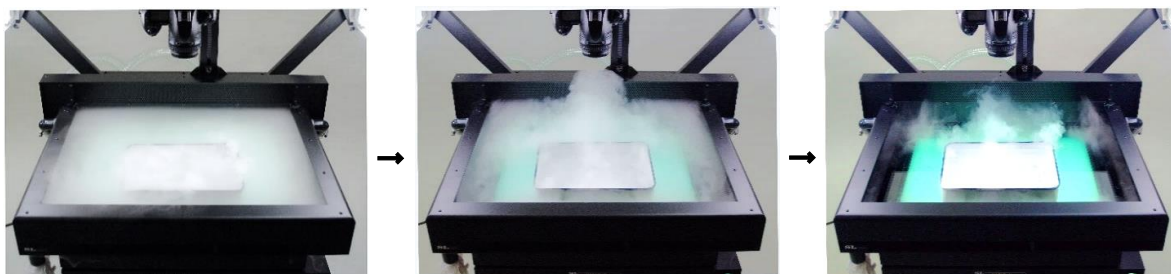

換気装置停止

運転開始直後

運転開始から数秒後

* 気流の動きがわかり易いようにドライアイスを使用したイメージ写真です。

製造元:株式会社杉浦研究所

〒158-0094東京都世田谷区玉川4-5-4


販売元:杉研商事株式会社

TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407

<http://www.sugiken.com/>

2019.05

■各部の名称

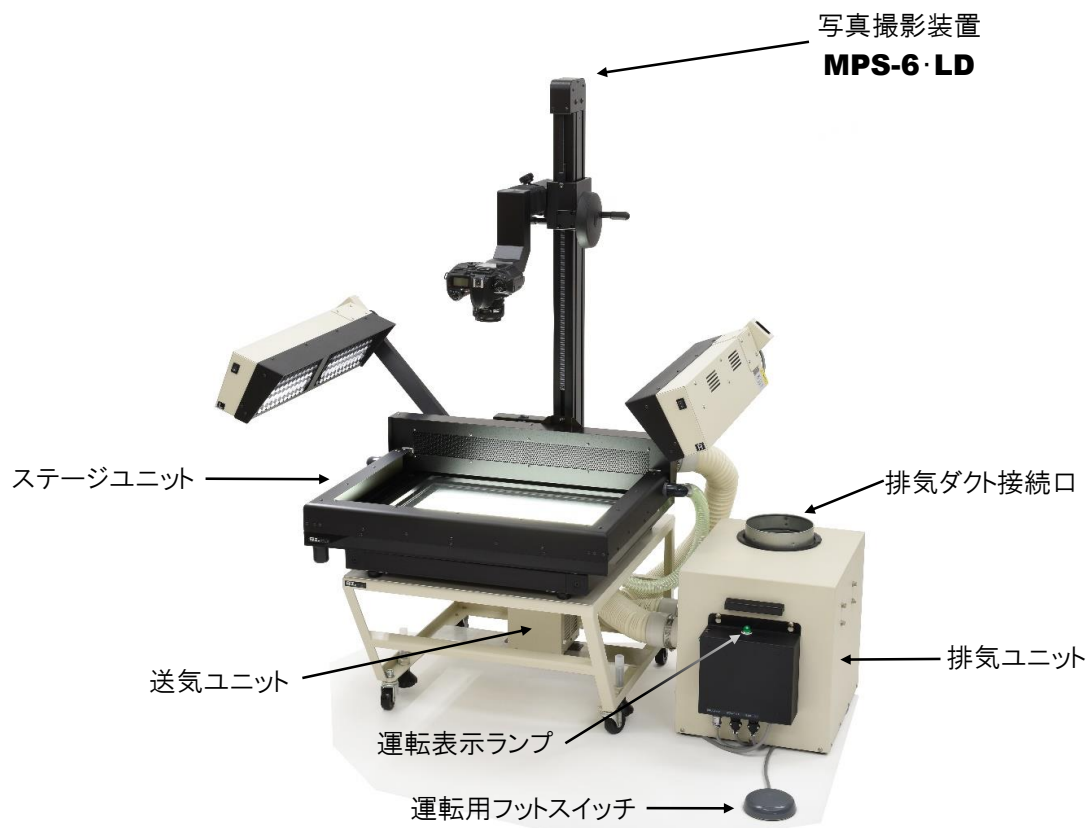

*ステージユニットの取付には防水ステージ(別売品)が必要です。

■製品仕様

| | | |
|--------------|------|---|
| ステージ ユニット | 換気方式 | プッシュ・エアとシロッコファンによる機械換気 |
| | 外形寸法 | W750×D590×H140mm(送排気ホースは除く) |
| | 重量 | 5kg |
| 送気ユニット | 外形寸法 | W590×D645×H375mm |
| | 重量 | 15.5kg |
| 排気ユニット | 外形寸法 | W470×D385×H430mm |
| | 重量 | 15.6kg |
| | 風量 | 193m ³ /h(50Hz)／210m ³ /h(60Hz) |
| | ダクト径 | Φ150mm |
| 定格入力 | | AC100V 125VA(50Hz)／160VA(60Hz) |

◇ご注意◇

- (1) お持ちの写真撮影装置**MPS-6**にオプションの防水ステージを組み合わせることで、ホルムアルデヒド換気装置が取り付けます。
- (2) 商品は現品渡しです。別途、お客様による設置及びダクト工事が必要です。
- (3) 製品改良のため外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造元:株式会社杉浦研究所

販売元:杉研商事株式会社

〒158-0094東京都世田谷区玉川4-5-4

TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407

<http://www.sugiken.com/>

2019.05