

クリーンな快適空間を実現

エアカーテン方式の換気装置を撮影台にまとめました！！


SL 医用写真撮影装置専用

[コードNo.7-771]

ホルムアルデヒド換気装置 PPF-1

- ★ プッシュ・エアがホルムアルデヒドや臭いの拡散を抑えます！（エアカーテン方式）
- ★ プッシュ・エアの噴き出し位置は標本の高さに合わせ2段階に切換えが可能、ステージを立体的にカバーします！
- ★ カメラのファインダーを覗きながら至近距離の撮影が安全に行えます！

作業者の口元から標本までの距離が130ミリの位置で、ホルムアルデヒド濃度を0.1ppm以下に抑えました。
* 濃度測定：厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器（指定番号 1501）を使用。

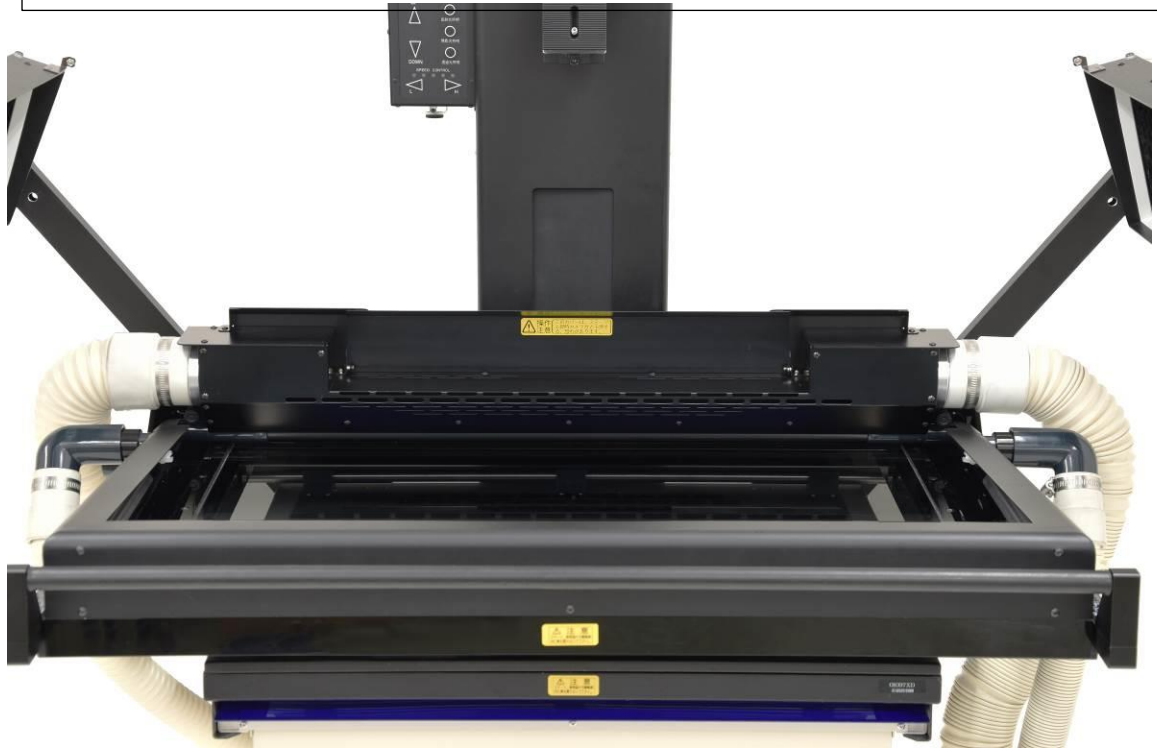

* ホルムアルデヒド換気装置PPF-1の取り付けには防水型 XY ステージ(別売品)が必要です。


- ★ 気流の動きに注目してください。換気装置を運転すると、すぐに効果が現れます！



写真① 換気装置停止



写真② 運転開始直後

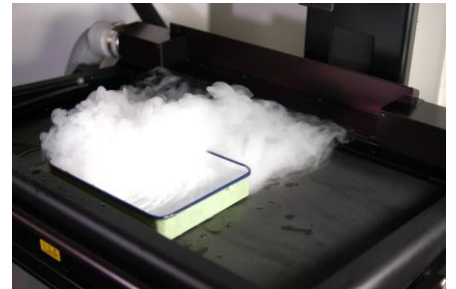


写真③ 運転開始から数秒

* 気流の動きがわかりやすいようにドライアイスを使用したイメージ写真です。

SUGIURA LABORATORY, INC.

■設置例■

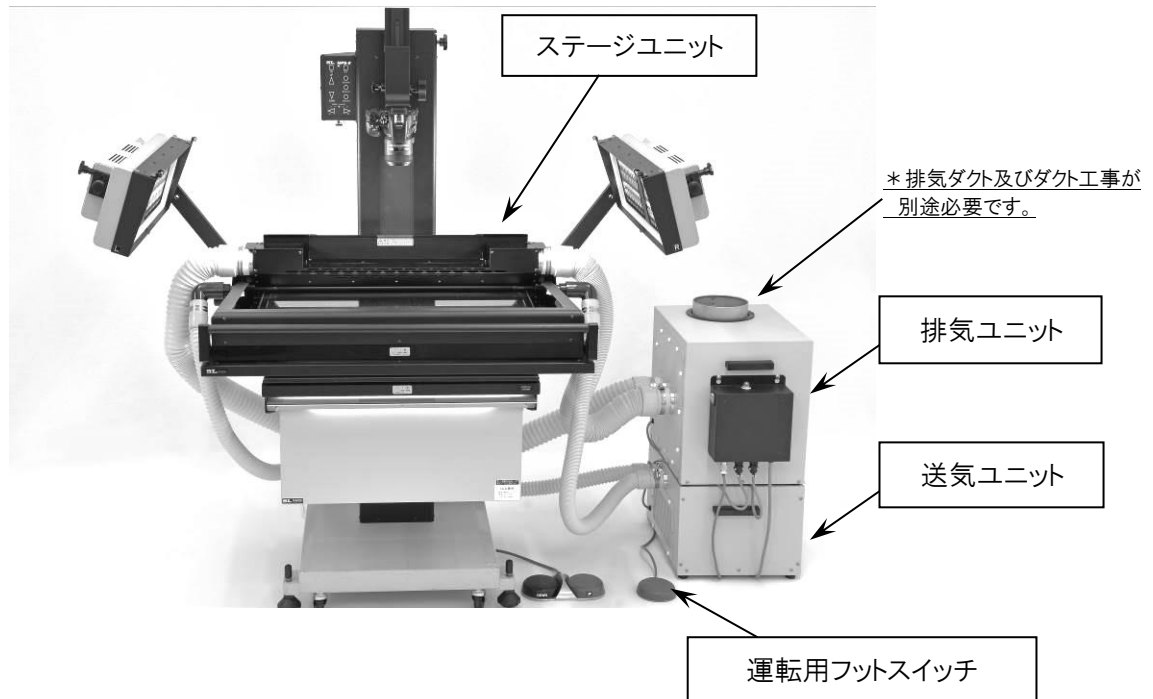

- * 1. 製品価格には、荷造り発送費、搬入設置費、排気ダクト等の費用は、含まれていません。
- * 2. 製品は現品渡しです。設置等につきましては、お客様にて対応をお願い致します。
- * 3. 排気ユニットと送気ユニットは、分離することができます。

■仕様及び性能■

ステージ ユニット	換気方式	プッシュ・エアとシロッコファンによる機械換気
	外形寸法	(W)820×(D)518×(H)145 mm (給排気ホースは除く) *ステージユニットの取り付けには防水型XYステージ(別売品)が必要です。
	重量	3.5 kg
送気ユニット	外形寸法	(W)430×(D)360×(H)255 mm
	重量	6.5kg
	電源及び消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 45W/55W
排気ユニット	外形寸法	(W)485×(D)380×(H)422 mm (コントロールボックスを含む)
	重量	13.5kg
	電源及び消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 118W/133W
	風量	280 m ³ /h(50Hz) 270 m ³ /h(60Hz)
	機外静圧	200 Pa
	ダクト口径	Φ150 mm

- * 1. ホルムアルデヒド換気装置PPF-1のステージユニット取り付けには、防水型XYステージ(別売品)が必要です。
- * 2. 製品改良のため外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造元:株式会社杉浦研究所

販売元:杉研商事株式会社

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-4

TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407

<http://www.sugiken.com/>

202106